

FR GIO-460BH2

innogIO

GIOsonic



Têtes de rechange pour
brosse à dents sonore
pour enfants
2 pièces

innogIO

Fabriqué en Chine pour **INNOGIO GLOBAL** sp. z o.o.
Ostródzka 74H, 03-289 Varsovie, Pologne

www.innogio.com



@innogIO.official




@innogio_com

MODE D'EMPLOI

Installation de la tête de brosse

- Tenez le manche de la brosse à dents d'une main.
- Insérez la nouvelle tête sur l'axe de la brosse.
- Appuyez délicatement jusqu'à ce que la tête soit correctement fixée.
- Assurez-vous qu'un léger espace reste visible entre la tête et le manche. Cela est normal et n'affecte pas le fonctionnement de l'appareil.

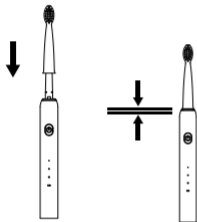

Il est recommandé de remplacer la tête de brosse tous les 3 mois environ, ou plus tôt si les poils sont usés, déformés ou endommagés.

Nettoyage et entretien

- Après chaque utilisation, rincez soigneusement la tête sous l'eau courante.
- Laissez-la sécher dans un endroit bien ventilé.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs ni de températures élevées pour la désinfection.

Avertissements

- Ce produit est exclusivement destiné à être utilisé avec les brosses à dents soniques de la série GIO-460 (Crocodile, Giraffe, Panda, Capybara).
- N'utilisez pas de têtes de brosse endommagées.
- Ce produit n'est pas un jouet. Conservez-le hors de portée des jeunes enfants.
- En cas d'irritation des gencives ou d'inconfort, cessez l'utilisation et consultez un dentiste.

